

INSTRUCTIVO DE USO

RINOKID SPRAY NASAL

1. Composición

Cada 100ml contiene:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Cloruro de Sodio | 3 g |
| • Fosfato Monosódico Anhidro | 0.046 g |
| • Fosfato Disódico Anhidro | 0.9 g |
| • Agua Purificada | c.s.p. 100mL |

2. Indicaciones

- Cada vez que se requiera higienización y humectación de las fosas nasales.

3. Finalidad de Uso

Rinokid Spray Nasal es un dispositivo médico indicado para la higienización y humectación de las fosas nasales.

4. Modo de Uso

- Lactantes: 1 aplicación en cada fosa nasal, 2 veces al día o según indicación, en posición semiacostado con la cabeza ligeramente inclinada.
- Niños: De 1 a 2 aplicaciones en cada fosa nasal, 2 a 4 veces por día o de acuerdo a necesidad.
- Adultos: 1 a 2 aplicaciones en cada fosa nasal, hasta 6 veces al día, según la necesidad. Es necesario eliminar las secreciones.

5. Contraindicaciones

No se han descrito hasta el momento.

6. Advertencias

Usar a temperatura ambiente

No usar si las fosas nasales se encuentran completamente bloqueadas.

7. Precauciones

- Evitar tragar la solución
- Administrar con precaución en pacientes que tengan heridas en las fosas nasales debido a que pueda producir dolor y ardor.
- Cuando se use el producto en lactantes o niños menores de 2 años, recordar la posición de la cabeza del niño: firme y levemente inclinada a mayor altura. Es importante evitar un atoramiento del niño por el producto por el paso de la solución hacia la laringe.
- **Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.**

8. Interacciones

No se han descrito hasta el momento

9. Uso durante el embarazo o lactancia

Sin restricciones

10. Uso en pediatría

Ver "modo de uso"

11. Uso en Geriatría

No se conocen restricciones en este grupo etario

12. Incidentes adversos

No se han descrito hasta el momento

13. Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas

No se han descrito

14. Presentación

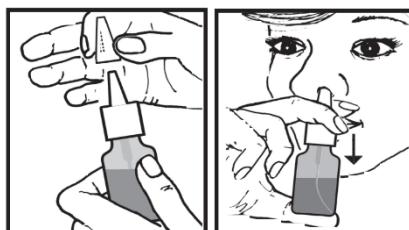
Caja de cartón conteniendo un (01) frasco de spray nasal x 25 ml con alrededor de 250 pulsaciones, con bomba dosificadora y sistema preventivo de la contaminación.

15. Condiciones de conservación y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente, menor de 30°C.

16. Instrucciones de Uso

- Quitar tapa exterior del dispositivo médico
- Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasa, manteniendo la cabeza y el frasco en posición vertical.
- Presionar el pulsador hacia abajo, inspirando el spray emitido por el pulsador.
- Lavar la punta del pulsador y colocar la tapa protectora.

**17. Periodo de validez**

2 años

Por: Laboratorio Pablo Cassará
S.R.L. Carhué 1096, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

Para: D&M Pharma Perú S.A.C.
RUC: 20514898961
Av. Pablo Carriquiry 660, piso 3, Urb.
Corpac San Isidro, Lima – Perú.

RS N° DM27496E